

Short
Track®



Medi-Globe®
A MEDI-GLOBE COMPANY

E.R.C.P. Kurzdrahtsystem

E.R.C.P. Katheter, Papillotome,
Steinextraktionsballon und Führungsdrähte



Produkte für die
Gastroenterologie
vom Spezialisten

Das E.R.C.P. Kurzdrahtsystem bietet in Verbindung mit einem Führungsdrahthalter eine unmittelbare Instrumentenkontrolle, volle Flexibilität, ein gutes Sicherheitsniveau und hohe Effizienz.

Vorteile:

- Der Führungsdraht bleibt beim Instrumentenwechsel ortsstabil positioniert und hat ein geringes Dislokationsrisiko
- Reduzierte Durchleuchtungszeit und Kontrastmittelapplikation
- Erleichterung für die Assistenz bei der Bedienung und Handhabung eines oder mehrerer Instrumente



E.R.C.P. Kurzdrahtsystem

Das Medi-Globe Kurzdrahtkonzept zeichnet sich durch drei herausragende Eigenschaften aus:

- Kompatibel zu gängigen Führungsdrahthaltern und die flexible Nutzung sowohl mit kurzen Drähten (200 - 260 cm) und langen Drähten (400 - 480 cm).
- „Tear-away“ Kathetertechnologie. Ein durchgängig geschlitztes Führungsdrahtlumen unterstützt beim Instrumentenwechsel das Separieren („Tear-away“) des Instruments vom Führungsdraht, ohne ihn vom Führungsdrahthalter zu lösen.
- Zahlreiche Produktvarianten, zum Beispiel Papillotom-Sets, die mit einem Führungsdraht vorgeladen sind.

Volle Flexibilität


Nach der Kanülierung der Papille mittels eines E.R.C.P. Katheters oder Papillotoms erleichtert ein proximaler Führungsdraht-Port das schnelle und anwenderfreundliche Legen eines Führungsdrahts.

Alternativ können alle ShortTrack Instrumente über einen liegenden Draht eingeführt werden („Over-the-wire“).


Daraus ergibt sich die volle Flexibilität für den Untersucher, je nach persönlicher Präferenz bzw. anatomischer Notwendigkeit die geeignete Technik zu wählen.



Legen eines Führungsdrahts via Führungsdraht-Port

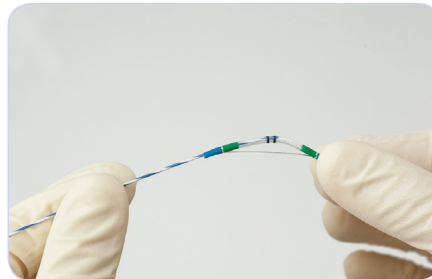

Vorschub und Einführung von E.R.C.P. Katheter und Papillotom über einen liegenden Führungsdraht

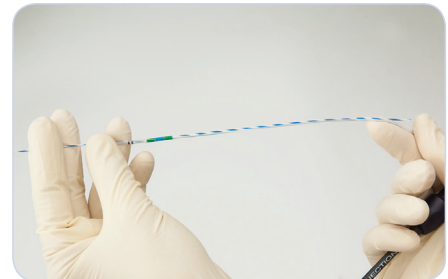

Vorschub und Einführung von Stein-Extraktionsballons über einen liegenden Führungsdraht





E.R.C.P. Katheter, Papillotome, Steinextraktionsballon und Führungsdrähte

„Tear-away“ Kathetertechnologie

ShortTrack E.R.C.P. Katheter und Papillotome zeichnen sich durch ein komplett geschlitztes Führungsdrahtlumen aus. Diese Technologie unterstützt bei diesen Instrumenten und insbesondere in Kombination mit kurzen Drähten die schnelle und sichere Entfernung des Instruments.

Schnell, weil der „Weg kurz“ ist, bis das Instrument vom Führungsdraht separiert ist.

Sicher, weil der Führungsdraht während des gesamten Vorgangs am Führungsdrahthalter fixiert bleibt und nicht gelöst wird, so dass er seine Position im Gallengang behält. Die Assistenz kann sich auf ein Instrument konzentrieren und braucht sich nicht um die Justierung des Führungsdrahts zu kümmern.



ShortTrack-Führungsdrahthalter – unterstützt die sichere Handhabung des Führungsdrahtes für ein schnelleres Verfahren

- Drehbarer Aufsteckmechanismus
Schnelle und einfache Montage auf dem Arbeitskanal
Individuelle Positionierung des Gerätes
- 3-Punkt-Verriegelungssystem - unterstützt durch einen Silikonkanal
Schnelle und einfache Fixierung des Führungsdrahtes
Starker Halt für einen oder zwei Drähte
- Vorperforierte Dichtung
Sofort einsatzbereit
- Einzigartiges, hochwertiges Silikonventil
Entwickelt, um Luft und Gallenaustritt deutlich zu reduzieren


Zahlreiche Produktvarianten, inklusive Papillotom – Sets, die mit einem Führungsdraht vorgeladen sind

ShortTrack Papillotome werden mit multi-filamenten und mono-filamenten Schneidedrähten angeboten. Alle Papillotome sind auch mit vorgeladenem Führungsdraht erhältlich und somit für eine Papillensondierung mit Führungsdraht komfortabel vorbereitet.



E.R.C.P. Katheter

Einmalgebrauch

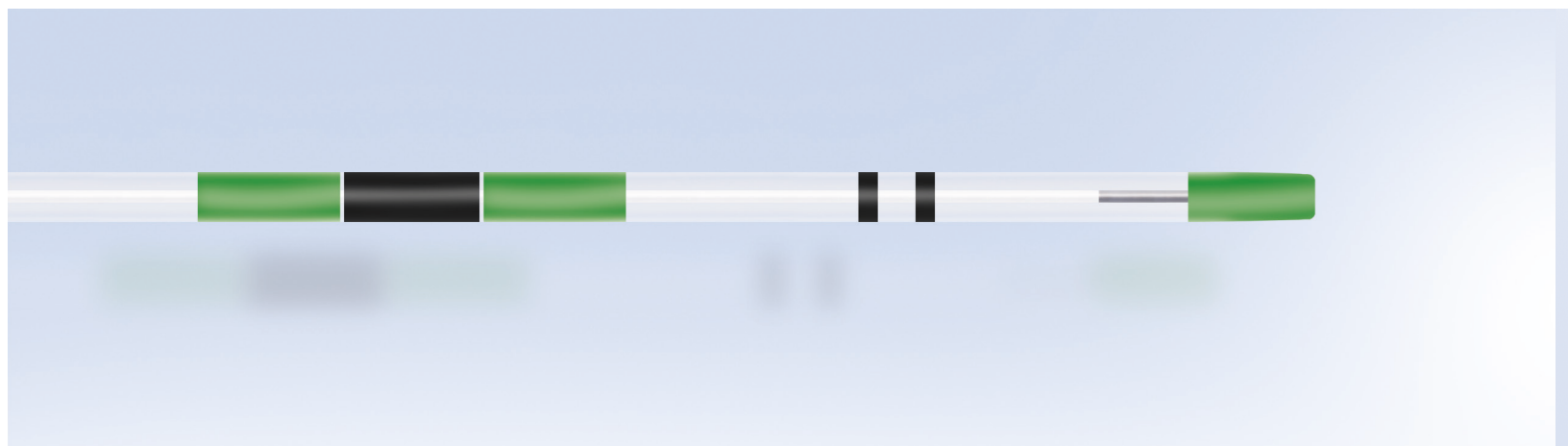

- Zweilumiger Katheter
Injektion von Kontrastmittel bei liegendem Führungsdraht
- Röntgendichte Marker
Optimale Sichtbarkeit unter Röntgendarstellung
- Farbmarkierungen
Genaue Kontrolle der Eindringtiefe

ShortTrack Konzept

Führungsdrahtplatzierung via proximalen Führungsdraht-Port

Vorschub des Instruments über einen liegenden Führungsdraht („Over-the-wire“)

„Tear-away“ Kathetertechnologie

ShortTrack – 2-lumiger E.R.C.P. Katheter


Bestell-Nr.	Beschreibung	Katheter-Außendurchmesser	Kompatibel mit Führungsdraht
GER-42-25-035	5 mm verjüngte Spitze	2,55 mm	.035"

ShortTrack® Führungsdrahthalter

Die ideale Ergänzung zu unserem E.R.C.P. Portfolio.

ShortTrack – Führungsdrahthalter

Bestell-Nr.	Artikel pro Einheit	Kompatibel mit	Produkt
GWL-01-00-001	5	Olympus; Fujifilm	

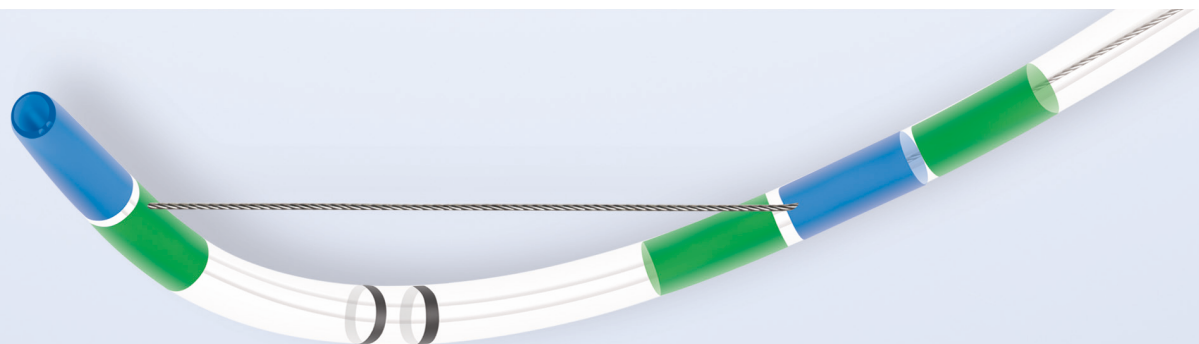

- Rotierbare Katheterspitze
Präzise Positionierung
- Version mit multi-filamentem und mono-filamentem Schneidedraht
- Röntgendichte Marker
Optimale Sichtbarkeit unter Röntgendarstellung
- Farbmarkierungen
Genaue Kontrolle der Eindringtiefe
- Papillotom-Sets mit integriertem vorgeladenem Führungsdraht
Komfortable Papillensondierung mit Führungsdraht

ShortTrack Konzept


Führungsdrahtplatzierung via proximalen Führungsdraht-Port

Vorschub des Instruments über einen liegenden Führungsdraht („Over-the-wire“)

„Tear-away“ Kathetertechnologie

ShortTrack RotaCut – 3-lumiges Papillotom

Bestell-Nr.	Spitzenform	Schneidedrahtlänge	Schneidedraht-Typ	Katheter-Außendurchmesser	Kompatibel mit Führungsdraht
GSP-41-25-020	5 mm verjüngte Spitze	20 mm	multi-filament	2,55 mm	.035“
GSP-41-25-025	5 mm verjüngte Spitze	25 mm	multi-filament	2,55 mm	.035“
GSP-41-25-030	5 mm verjüngte Spitze	30 mm	multi-filament	2,55 mm	.035“
GSP-42-25-020	5 mm verjüngte Spitze	20 mm	mono-filament	2,55 mm	.035“
GSP-42-25-025	5 mm verjüngte Spitze	25 mm	mono-filament	2,55 mm	.035“
GSP-42-25-030	5 mm verjüngte Spitze	30 mm	mono-filament	2,55 mm	.035“

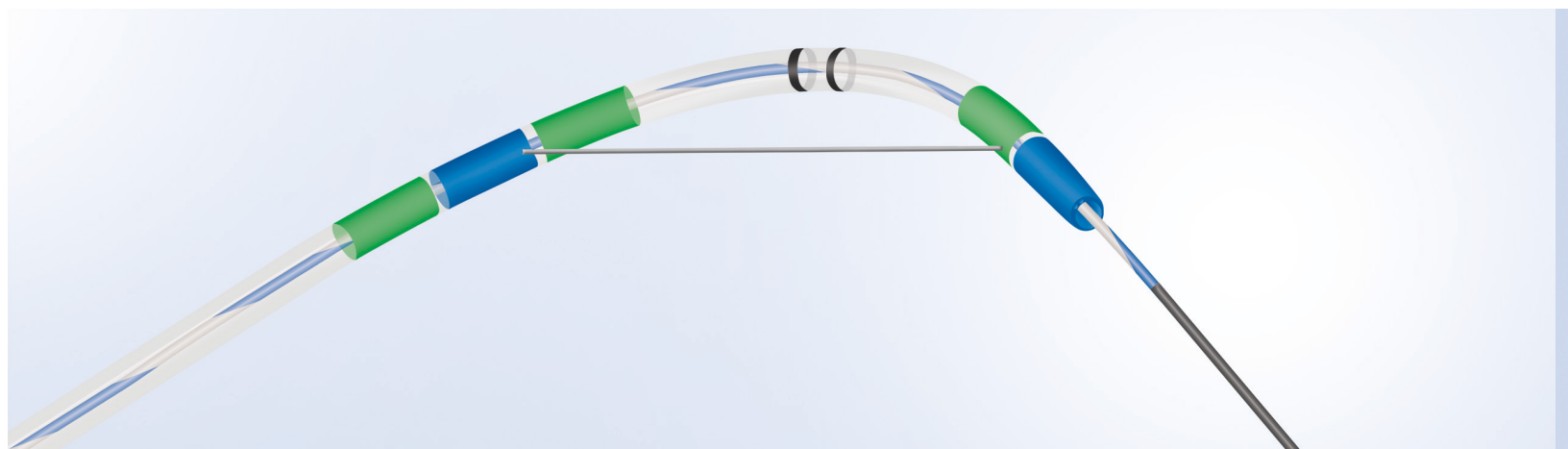

Mit vorgeladenem Kurzdraht

ShortTrack RotaCut – 3-lumiges Papillotom, vorgeladen mit Nitinol-Draht .035“, 2-farbig Teflon ummantelt, mit einer 5 cm langen super flexiblen röntgendichten und hydrophilen Spitze

Bestell-Nr.	Spitzenform	Schneidedrahtlänge	Schneidedraht-Typ	Katheter-Außendurchmesser	Führungsdraht-Länge
GSP-41-25-020PS	5 mm verjüngte Spitze	20 mm	multi-filament	2,55 mm	260 cm
GSP-41-25-025PS	5 mm verjüngte Spitze	25 mm	multi-filament	2,55 mm	260 cm
GSP-41-25-030PS	5 mm verjüngte Spitze	30 mm	multi-filament	2,55 mm	260 cm
GSP-42-25-020PS	5 mm verjüngte Spitze	20 mm	mono-filament	2,55 mm	260 cm
GSP-42-25-025PS	5 mm verjüngte Spitze	25 mm	mono-filament	2,55 mm	260 cm
GSP-42-25-030PS	5 mm verjüngte Spitze	30 mm	mono-filament	2,55 mm	260 cm


Mit vorgeladenem Langdraht

ShortTrack RotaCut – 3-lumiges Papillotom, vorgeladen mit Nitinol-Draht .035“, 2-farbig Teflon ummantelt, mit einer 5 cm langen super flexiblen röntgendichten und hydrophilen Spitze

Bestell-Nr.	Spitzenform	Schneidedrahtlänge	Schneidedraht-Typ	Katheter-Außendurchmesser	Führungsdraht-Länge
GSP-41-25-020PL	5 mm verjüngte Spitze	20 mm	multi-filament	2,55 mm	450 cm
GSP-41-25-025PL	5 mm verjüngte Spitze	25 mm	multi-filament	2,55 mm	450 cm
GSP-41-25-030PL	5 mm verjüngte Spitze	30 mm	multi-filament	2,55 mm	450 cm
GSP-42-25-020PL	5 mm verjüngte Spitze	20 mm	mono-filament	2,55 mm	450 cm
GSP-42-25-025PL	5 mm verjüngte Spitze	25 mm	mono-filament	2,55 mm	450 cm
GSP-42-25-030PL	5 mm verjüngte Spitze	30 mm	mono-filament	2,55 mm	450 cm

Multi-Stage Extractor

Einmalgebrauch

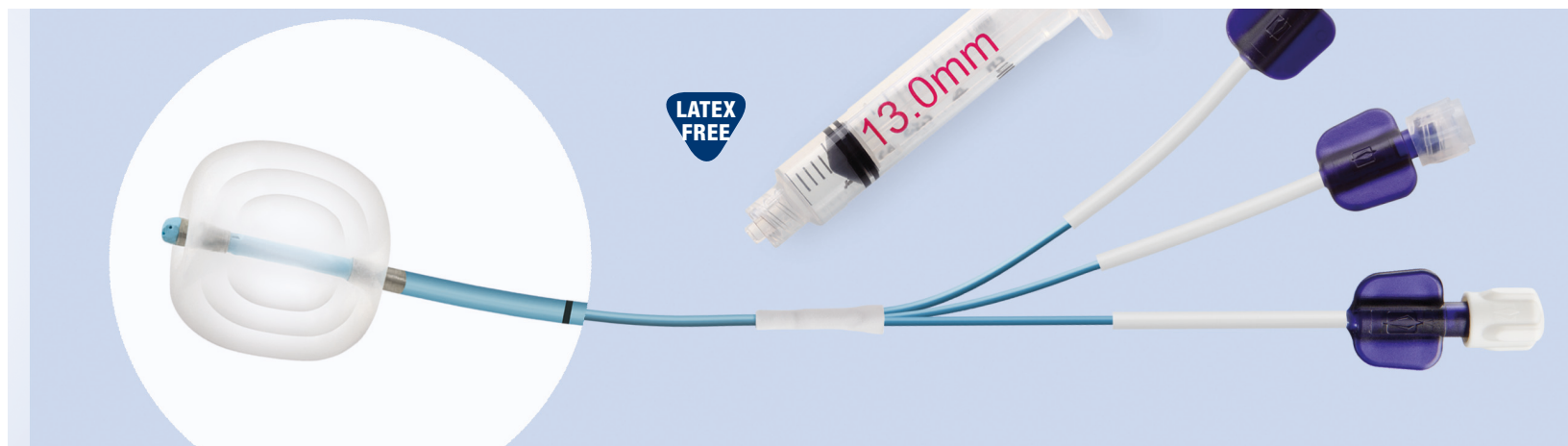

- Latexfreie Ballonqualität
Kein potentielles Latex-Allergierisiko und Eignung für zusätzliche Patientengruppen
- Ein Ballon für alle Ballondurchmesser von 9 - 16 mm
Zeitsparend und kosteneffektiv
- Inkl. Set mit 3 markierten Spritzen für vordefinierte Ballondurchmesser von 9 mm, 13 mm und 16 mm
Sichere und exakte Balloninflation
- Röntgendichte Markierungen am distalen und proximalen Ende des Ballons
Präzise Positionierung im Gallengang
- Längenmarkierung in 1 cm Abständen auf dem Katheter
Endoskopische Kontrolle der Eindringtiefe

ShortTrack Konzept

Vorschub des Instruments über einen liegenden Führungsdraht („Over-the-wire“)

ShortTrack – 3-lumiger Steinextraktionsballon mit Kontrastmittelapplikation oberhalb des Ballons, inklusive einem Set von 3 markierten Spritzen für die Ballonbefüllung auf einen Durchmesser von jeweils 9 mm, 13 mm & 16 mm

Bestell-Nr.	Ballondurchmesser	Füllvolumen - Luft	Katheter-durchmesser	Arbeitslänge	Führungsdraht-kompatibilität
GEB-47-25-035	9-13-16 mm	1.5 ml – 9 mm 2.5 ml – 13 mm 5.0 ml – 16 mm	7.5 Fr.	200 cm	.035 "

Kompatible Führungsdrähte

Einmalgebrauch & wiederverwendbar



EasyPass-Führungsdrähte sind mit einer super flexiblen 5 cm langen hydrophilen und röntgendichten Spitze ausgestattet. Die Spitze des knickstabilen Nitinol EasyPass-Führungsdrahts zeichnet sich durch ein sehr gutes atraumatisches Aufstellverhalten aus. Er eignet sich insbesondere zur Sondierung und Passage entlang von schwierigen Gallen- und Pankreasgangstrikturen um weiterführende Interventionen zu unterstützen. Die Nutzung im Rahmen einer Papillotomie ist möglich.

Nitinol-Führungsdrähte dienen hauptsächlich zur Platzierung von weiteren diagnostischen und therapeutischen Instrumenten im Gallen- und Pankreasgang. Der Nitinol-Draht ist ausreichend isoliert und eignet sich zur Nutzung im Rahmen einer Papillotomie. Der Untersucher hat die Wahl zwischen einer Version mit einer sehr weichen Spitze „Soft Tip“ und einer „Standard Tip“ Version, die mit einer etwas steiferen rigideren Spitze ausgestattet ist.

Der Führungsdraht ist autoklavierbar und in Abhängigkeit von seiner Unversehrtheit wiederverwendbar.

EasyPass-Führungsdraht – Nitinol-Draht, 2-farbig Teflon ummantelt, mit einer 5 cm langen super flexiblen röntgendichten und hydrophilen Spitze, Einmalgebrauch, steril verpackt

Kurzdraht-Konzept 260 cm	Langdraht-Konzept 450 cm	Beschreibung	Durchmesser
GGW-10-35-260	GGW-10-35-450	„Super Flexible Tip“	.035“

Nitinol-Draht – 2-farbig Teflon ummantelt und hydrophil beschichtet, mit einer 5 cm langen röntgendichten Spitze, autoklavierbar, steril verpackt

Kurzdraht-Konzept 260 cm	Langdraht-Konzept 450 cm	Beschreibung	Durchmesser
–	GGW-03-21-450	„Soft Tip“	.021“
GGW-03-25-260	GGW-03-25-450	„Soft Tip“	.025“
GGW-03-35-260	GGW-03-35-450	„Soft Tip“	.035“
–	GGW-04-35-450	„Standard Tip“	.035“

Vertrieb:

Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1-5
D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Phone: +49 (0) 8032 - 973-100
Fax: +49 (0) 8032 - 973-392
E-Mail: sales@medi-globe.de
www.medi-globe.de

L-ST-SU-00-BRD / LL-0172 Ver. 3.0 (2019-04)